



ReSound TV Streamer 2

BRUKSANVISNING

GN Making Life Sound Better

Velkommen

Gratulerer med kjøpet av ReSound TV-streamer 2.

TV-streamer 2 gir deg høykvalitets streamet lyd fra TV, stereoa-nlegg, datamaskiner og lignende utstyr direkte til høreapparatet.

Les bruksanvisningen grundig slik at du kan få fullt utbytte av TV-streamer 2. Kontakt audiografen din hvis du har spørsmål.

For mer informasjon, besøk

www.resound.com

For din egen sikkerhet, bør du lese kapittelet Viktig informasjon på side 28-29 grundig.

Modell: SAS-3

FCC ID: X26SAS-3

Erklæring:

Dette produktet samsvarer med del 15 av FCC-reglene.

Bruk av produktet er underlagt følgende to betingelser: (1) dette produktet kan ikke fremkalle skadelig interferens, og (2) dette produktet skal akseptere enhver mottatt interferens, herunder interferens som kan fremkalle uønsket drift.

Merk: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en Klasse B digital enhet ifølge del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det føre til skadelige forstyrrelser i radiokommunikasjonen.

Men det er likevel ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser for radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

Gjeninnstille eller flytte mottakerantennen.

Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.

Kontakte forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Tiltenkt bruk

TV-streamer 2 er beregnet for bruk med ReSound høreapparater, slik at det blir enklere for brukeren å følge med på TV-programmer og andre programmer med lyd. Den viktigste funksjonen til TV-streamer 2 er å overføre signaler fra et TV-apparat eller annen lydenhet til et ReSound trådløst høreapparat.

Dette produktet er i samsvar med følgende standarder:

I EU: Enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene i vedlegg I til rådsdirektiv 93/42/EEC for medisinsk utstyr (MDD)

Herved erklærer GN Hearing A/S at radioutstyrstypene SAS-3 samsvarer med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten i EU-deklarasjonen om konformitet er tilgjengelig på følgende nettside:

www.declarations.resound.com

I USA: FCC CFR 47 del 15, underdel C.

Andre identifiserte gjeldende internasjonale regulatoriske krav i land utenfor EU og USA. Vennligst se lokale lands krav for disse områdene.

Modell: SAS-3

IC: 6941C-SAS3

Dette Klasse B digitale apparatet overholder kanadisk ISED-reglene

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ISED du Canada.

Bruk av produktet er underlagt følgende to betingelser: (1) dette produktet kan ikke fremkalle skadelig interferens, og (2) dette produktet skal akseptere enhver mottatt interferens, herunder interferens som kan fremkalle uønsket drift.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

I Japan:


I Japan er dette produktet tildelt et betegnelsesnummer av Ministry of Internal Affairs and Communications under "Ordinance concerning Technical Regulations Conformity Certification etc. of Specified Radio Equipment (特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則)" Artikkel 2-1-19 "Dette produktet må ikke endres (ellers vil det tildelte betegnelsesnummeret bli gjort ugyldig)."

Innhold

Beskrivelse	8
Komme i gang.	10
Pare sammen med høreapparat	19
Starte og stoppe streaming	23
Volum	26
Ekko/justerbar forsinkelse modus.	28
Viktig informasjon	29
Tekniske spesifikasjoner	32
Garanti	32
Feilsøking	34


Beskrivelse

- 1 Micro-USB strømkontakt
- 2 Pareknapp
- 3 Mono/stereo-bryter
- 4 Analog lydinnang
- 5 Optisk Toslink (S/PDIF) lydinnang (anbefalt)
- 6 Coaxial lydinnang

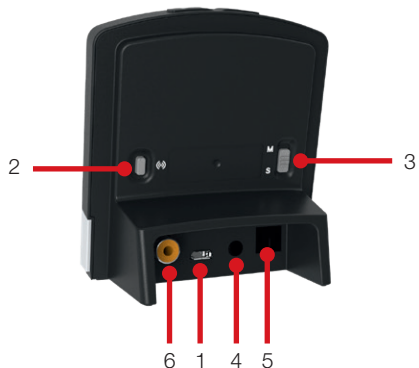

8

- 7 Øke volum
- 8 Senke volum
- 9 Strømlys (grønt)
- 10 Aktivitetslys (gult)
- 11 Veggkontakt
- 12 Micro-USB strømkontakt

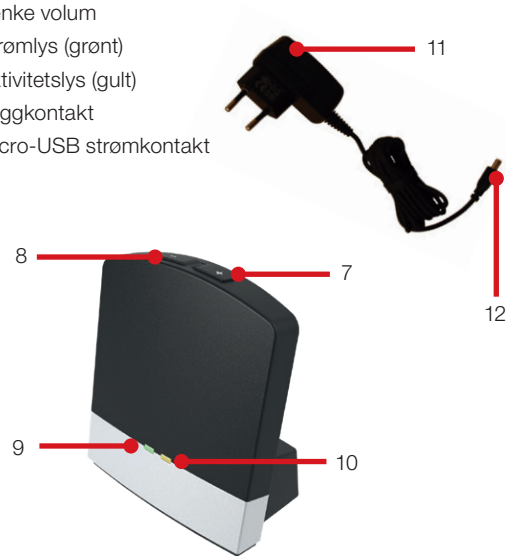

9

Komme i gang

Installere TV-streamer 2

Avhengig av TV, stereoanlegg, datamaskin eller lydenhet, kan installeringen av TV-streamer 2 gjøres på flere måter, som beskrevet i de følgende avsnittene. Følgende trinn tar deg raskt gjennom paring og tilkobling. Start ved å koble sammen TV-streamer 2 og lydkilden og pare TV-streamer 2 med høreapparatene. Ofte må man tilkoble signalboks istedet for TVen.




TV-streamer 2 støtter både analog og digital lyd. Les følgende deler for informasjon om støttede lydformater og hvordan du kobler TV-streamer 2 til lydkildene.

Bruke optisk (Toslink) lydinnang

1. Sett støpslet i vegguttaket og ledningen i mikro-USB-kontakten på TV-streamer 2.
2. Sett en av pluggene på den optiske lyd-kabelen inn i den optiske lydinngangen (5 på side 8) på TV-streamer 2.

Merk: De fleste optiske kablene blir levert med en liten beskyttelseshette som beskytter tuppen av kabelen. Husk å fjerne denne hetten før du stikker inn kabelen.

3. Sett den andre enden av den optiske lyd-kabelen inn i "digital lyd ut/optisk" på lydkilden.

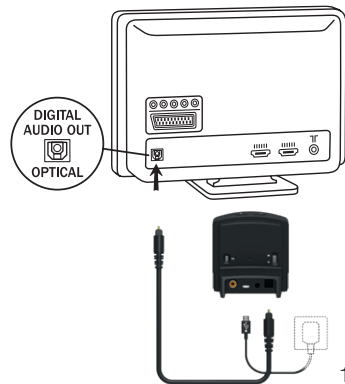


Koble TV-streamer 2 til en analog lydkilde (f.eks. TV eller stereoanlegg)

1. Sett støpslet i vegguttaket og ledningen i mikro-USB-kontakten på TV-streamer 2.
2. Sett lydkabelen inn i stereoutgangen på TV-streamer 2 (4 på side 8).
3. Sett den andre enden av lydkabelen inn i "AUDIO OUT" på lydkilden.
4. "AUDIO OUT" er vanligvis merket med "L - R" for venstre (L) og høyre (R), og er plassert bak på lydkilden.



Merk: Med denne installasjonen vil de fleste lydtkilder sende lyd til begge høreapparatene og eventuelle høyttalere som er koblet til lydkilden. På noen lydtkilder kan du justere balansen mellom AUDIO OUT og høyttalerne, se bruksanvisningen som fulgte med lydkilden for mer informasjon.

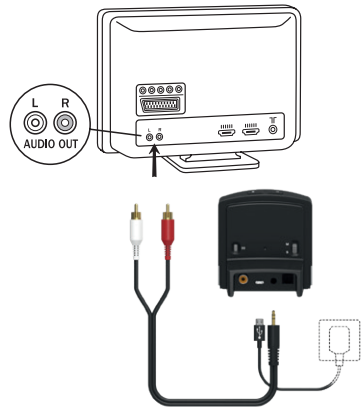

Alternativ installering med analog lyd-kabel:

Hvis det ikke er mulig å koble TV-streamer 2 til AUDIO OUT på lyd-kilden ved hjelp av de røde og hvite pluggene, kan følgende tilkoblingsalternativer benyttes:


Minijack-kontakt:

1. Sett støpslet i vegguttaket og ledningen i mikro-USB-kontakten på TV-streamer 2.
2. Koble minijack-kontakten på lyd-kabelen inn i stereoutgangen på TV-streamer 2 (4 på side 8).
3. Koble minijack-kontakten til de røde og hvite pluggene på andre siden av lyd-kabelen.
4. Koble minijack-kontakten inn i HODETELEFON-utgangen, eller i lyd-utgangen på datamaskinen.



Merk: HODETELEFON-utgangen er vanligvis plassert på siden eller foran på lyd-kilden. Ved bruk av HODETELEFON-utgangen vil vanligvis kun den personen som bruker høreapparatet høre lyd, og høyttalerne på lydenheten er dempet.

Se den første installasjonen eller installasjonen på følgende side hvis du ikke ønsker dempede høyttalere. Det kan være at lyd-kilden støtter bruk av hodetelefoner og høyttaler samtidig. Sjekk dette i bruksanvisningen til lyd-kilden.

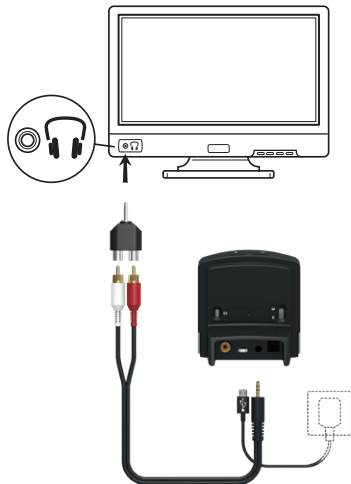


Scart-kontakt:

1. Sett støpslet i vegguttaket og ledningen i mikro-USB-kontakten på TV-streamer 2.
2. Koble minijack-kontakten på lyd-kabelen inn i stereoutgangen på TV-streamer 2 (4 på side 8).
3. Koble scart-kontakten til de røde og hvite pluggene på andre siden av lyd-kabelen.
4. Sett scart-kontakten inn i scart-utgangen på lyd-kilden.



Merk: Scartutgangen er vanligvis plassert på baksiden eller siden av lyd-kilden. Se bruks-anvisningen for lyd-kilden dersom ekstra konfigurering av scart-utgangen er nødvendig.

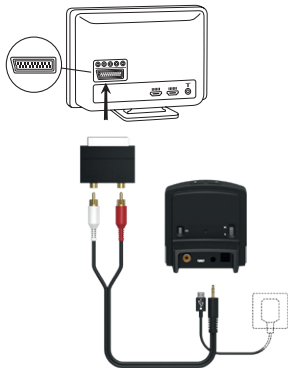

Koble TV-streamer 2 til en digital lydkilde (f.eks. TV eller stereoanlegg)



TV-streamer 2 støtter både analog og digital lydinnngang. Følgende formater er støttet for digital lydinnngang:

Stereo PCM

- Samplingsfrekvens: Opptil 192 kHz
- Samplingsoppløsning: Opptil 32 biter


Dolby Digital

- Kanaler: Maks. 5,1
- Bitrate: 32 kbs til 640 kbs
- Samplingsfrekvens: 32, 44,1 og 48 kHz

Merk: Dolby Digital Plus (krever en HDMI-tilkobling), Dolby True-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Digital EX, Dolby Digital Surround EX og AAC (Advanced Audio Codec) er ikke støttet.

Bruke coaxial lydinnang

1. Sett støpslet i vegguttaket og ledningen i mikro-USB-kontakten på TV-streamer 2.
2. Sett en av pluggene på den coaxial-lydkabelen inn i den coaxial-inngangen (6 på side 8) på TV-streamer 2.
3. Sett den andre enden av den coaxiale lydkabelen inn i "digital lyd ut/coaxial" på lydkilden.

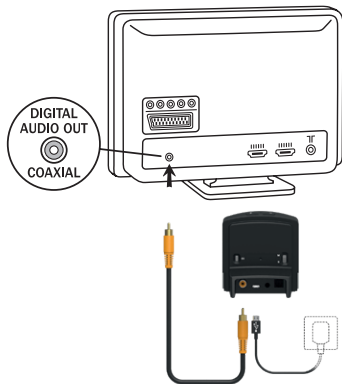

Pare med høreapparatene



Merk: Følgende informasjon er ment primært for din audiograf, som i de fleste tilfeller vil fullføre de oppgavene som er nødvendig før TV-streamer 2 kan brukes med høreapparatene. Prosessen er imidlertid laget for å være enkel, og de aller fleste kan gjøre det selv.

Det er mulig å pare opptil tre streamingenheter f.eks. to TV-streamere og en ReSound Mikrofon (valgfritt ekstrautstyr) til et gitt par av høreapparater. Det er derfor nødvendig på velge kanal 1, 2 eller 3 når du starter pareprosessen.

Pare TV-streamer 2 i kanal 1

1. Kontroller at strømledningen på TV-streamer 2 er koblet til i vegguttaket og at det grønne lyset foran på TV-streamer 2 (9 på side 9) er PÅ. Høreapparatene må være AV - åpne batteriluken.
2. Trykk på pareknappen på TV-streamer 2 (2 på side 8) én gang. Det gule lyset foran på TV-streamer 2 (10 på side 9) vil nå blinke én gang hvert 2. sekund for å indikere at TV-streamer 2 er klar for å pares i kanal 1. Din TV-streamer 2 er i paremodus i 20 sekunder.

Pare TV-streamer 2 i kanal 2

1. Kontroller at strømledningen på TV-streamer 2 er koblet til i vegguttaket og at det grønne lyset foran på TV-streamer 2 (9 på side 9) er PÅ. Høreapparatene må være AV - Sett apparatene i laderen eller åpne batterilukene.
2. Trykk på pareknappen på TV-streamer 2 én gang. Det gule lyset foran på TV-streamer 2 vil nå blinke én gang hvert 2. sekund for å indikere at TV-streamer 2 er klar for å pares i kanal 1. Din TV-streamer 2 er i paremodus i 20 sekunder.
3. Ta ut apparatene fra laderen eller lukk batterilukene på begge høreapparatene mens paremodus er aktivert og undersøk at de er PÅ. En vellykket paring indikeres av en hørbar melodi som avspilles i begge høreapparatene. Du er nå klar til å bruke TV-streamer 2. Se side 23 for lydaktivering.

Pare TV-streamer 2 i kanal 2

1. Trykk pareknappen to ganger. Det gule lyset foran på TV-streamer 2 vil nå blinke to ganger hvert 2. sekund for å indikere at den er klar for å pares i kanal 2.
2. Ta ut apparatene fra laderen eller lukk batterilukene på høreapparatet mens det er i paremodus.

Pare TV-streamer 2 i kanal 3

1. Trykk pareknappen tre ganger. Det gule lyset foran på TV-streamer 2 vil nå blinke tre ganger hvert 2. sekund for å indikere at den er klar for å pares i kanal 3.
2. Ta ut apparatene fra laderen eller lukk batterilukene på høreapparatet mens det er i paremodus.

Blinkemønstre ved paring:

Trykk på pa-reknappen	Lysindikatormønstre	Kanal
1	① ① ① ①	1
2	①② ①② ①② ①②	2
3	①②③ ①②③ ①②③ ①②③	3


Starte og stoppe streaming

Slå på TV, stereoanlegg, datamaskin eller annen lydenhet som er koblet til TV-streamer 2. Sørg for at også høreapparatene er slått på. Streaming kan startes på flere måter.

1. Trykk og hold ned trykknappen på et av høreapparatene i ca. tre sekunder. Hvis ikke høreapparatene er innstilt for synkronisering mellom apparatene må dette gjøres separat på begge høreapparatene for at streamingen skal kunne høres på begge ører. Når TV-streamer 2 er koblet til, vil en hørbar melodi avspilles i høreapparatet og etterfølges av streaminglyden
2. Hvis du har en ReSound Fjernkontroll (ekstrautstyr), trykker du på streamingknappen på fjernkontrollen. Når høreapparatet er koblet til TV-streamer 2, vil en kort melodi avspilles i begge ørene for å bekrefte at lyd streames, og et streamingikon vises i displayet. Streamet lyd høres nå i høreapparatene.

Du kan også tilkoble streamer med hjelp av app på mobil eller nettbrett.

Hvis mer enn én TV-streamer 2 er tilgjengelig, kan du trykke streamingknappen på fjernkontrollen 2 eller 3 ganger, avhengig av hvilken TV-streamer 2 du ønsker å streamer lyd fra.

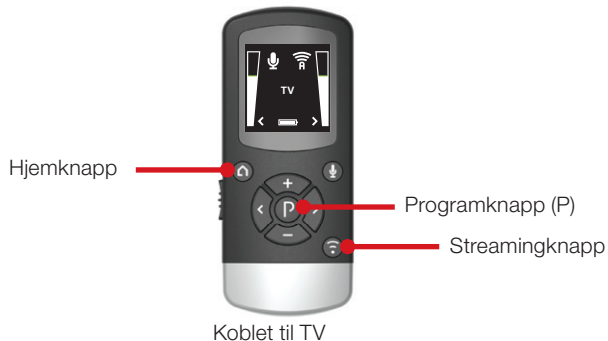

De inntil 3 TV-streamer 2-enhetene er merket med A, B eller C, og hvilken streamingenhet som er i bruk vises på displayet på fjernkontrollen.

Hvis du ikke har fjernkontroll, trykker og holder du trykknappen i 3 sekunder på høreapparatet 2 eller 3 ganger for å få tilgang til streamingenhet nummer 2 eller 3.

Stoppe streaming

Trykk på knappen på ett av høreapparatene (programbytte). Dette vil avbryte streaming på den siden som er trykket og returnere til det sist brukte programmet.

Merk: Hvis synkronisering av programmer mellom apparatene er aktivert, går begge apparatene tilbake til det sist brukte programmet ved hjelp av et trykk på ett av apparatene.

Med ReSound Fjernkontroll (ekstrautstyr) trenger du bare å trykke på P-knappen som er plassert midt på tastaturet. Dette vil føre høreapparatet tilbake til det sist brukte programmet. Du kan også trykke på hjemknappen for å gå tilbake til standardinnstillinger.

Hvis du bruker telefonen med ReSound PhoneClip +, vil streaming fra TV-streamer 2 bli midlertidig avbrutt. Når du er ferdig med samtalen, vil TV-streamingen gjenopptas.

i *Merk: Du kan komme utenfor rekkevidde (> 7 m) fra TV-streamer 2. Hvis du kommer tilbake innenfor rekkevidde i løpet av 5 minutter, vil høreapparatet kobles til automatisk og fortsette streamingen.*

Volum

Justere volum

TV-streamer 2 er designet for å gi et behagelig lyttenivå fra det øyeblikket enheten blir aktivert. Men for noen enheter eller lytte-miljøer kan det være ønskelig å justere volumet. Dette kan gjøres på flere ulike måter. Husk at justering av volum på TV-streamer 2 kun gjelder streamingssignalene, ikke volum til omgivelsene.

Bruk "+" og "-" (7 og 8 på side 9) til å justere volumet til et behagelig nivå. Sørg for at høreapparatene er behagelig justert før du endrer innstillingene med volumkontrollen. I de fleste tilfeller bør denne justeringen kun gjøres én gang, siden TV-streamer 2 lagrer de siste voluminnstillingene.

Bruk ReSound fjernkontroll (tilleggsutstyr) for å justere både lydstyrken på streamet lyd og fra mikronen på høreapparatene*. Spør audiografen for mer informasjon om dette tilbehøret.

Volumet kan i noen tilfeller ytterligere justeres ved kilden for signalet, for eksempel ved å skru ned lyden på TV-en. Dette vil justere lydstyrken på den streamede lyden som sendes trådløst til høreapparatene. Justering av lydnivået på TV-en vil også påvirke lyttenivået i rommet.

Mono/stereo-kontroll

**Justering av både høreapparat og streamingvolum er kun tilgjengelig med ReSound Fjernkontroll 2 eller via app på mobilen.*

Det er mulig å stille inn streaming av lyd i stereo (to kanaler) eller mono (en kanal) ved å bruke skyvebryteren med to stillinger (3 på side 8). Bryteren skal settes til Stereo for bruk med to høreapparater (Høyre og venstre), og i Mono for brukere av kun ett høreapparat.

Ekko/justerbar forsinkelse modus

I sjeldne tilfeller kan det være avvik mellom lyden streamet til høreapparatet og lyden som kommer fra TV-høytalerne (ekko) eller avvik mellom streamet lyd og TV-bildet (leppesynkronisering). Dette kan forekomme i mer avanserte oppsett hvor TV-streamer 2 ikke er direkte koblet til TV-en (f.eks. gjennom en boks eller en annen eksternt enhet).

For å korrigere forsinkelsen kan TV-streamer 2 justeres på følgende måte:

1. Kontroller at TV-streamer 2 er slått på og at høreapparatene mottar streamet lyd.
2. Trykk og hold pareknappen (2 på side 8) i 3 sekunder. TV-streamer 2 går nå inn i justerbar forsinkelse-modus, hvor det grønne lyset foran på TV-streamer 2 vil blinke én gang hvert 2. sekund. Det gule lyset lyser når det finnes et lydsignal.
3. Bruk "+" og "-" (7 og 8 på side 9) øverst på TV-streamer 2 for å øke eller redusere forsinkelsen på signalet i trinn på 10 ms. Signalet kan forsinkes i området 0-250 ms.
4. Når ønsket forhold mellom streamet lyd til høreapparatene og lyd fra TV-høytalerne eller streamet lyd og TV-bildet er nådd, trykkes og holdes pareknappen i 3 sekunder. TV-streamer 2 går nå tilbake til normal drift, indikert av at det grønne lyset lyser konstant.

Forsinkelsen angitt i justerbar forsinkelse-modus vil bli lagret i TV-streamer 2.

Hvis du ikke går ut av justerbar forsinkelse-modus ved å trykke og holde pareknappen i 3 sekunder, vil TV-streamer 2 automatisk gjenoppta normal drift etter 30 minutter.

For å tilbakestille forsinkelsen til 0 ms (fabrikkinnstilling) trykker du og holder pareknappen samtidig som du slår på TV-streamer 2.

Viktig informasjon

Ettersyn og vedlikehold

Rengjør TV-streamer 2 med en fuktig klut. Bruk aldri husholdningsrengjøringsmidler (vaskepulver, såpe osv.) eller alkohol til å rengjøre enheten.

Når TV-streamer 2 ikke er i bruk over lengre perioder, bør strømkontakten trekkes ut.

Generelle advarsler



Hold TV-streamer 2 utilgjengelig for barn under 3 år.

TV-streamer 2 bruker lavstrøms, digitalt kodede overføringer for å kunne kommunisere med andre trådløse enheter. Selv om det er usannsynlig, kan nærliggende elektroniske enheter bli berørt. I slike tilfeller flyttes TV-streamer 2 bort fra det elektroniske utstyret som blir påvirket.

TV-streamer 2 må kun brukes med strømforsyningen som ble levert sammen med produktet. Bruk av andre typer kan skade eller ødelegge produktet og kan være farlig. Bruk av andre strømforsyninger kan oppheve alle godkjenninger eller garantier.

- Når du kobler fra strømledningen, må du trekke ut støpslet og ikke trekke i ledningen.
- Bruk aldri en strømforsyning som er skadet.
- Ikke forsøk å demontere strømforsyningen da det kan utsette deg for farlige elektriske støt.
- Ikke bruk strømforsyningen utendørs eller i fuktige omgivelser.

Hvis du bruker TV-streamer 2 og enheten blir påvirket av elektromagnetisk interferens, beveger du deg bort fra kilden.

Generelle forholdsregler



Høreapparatene og TV-streamer 2 ble gitt en unik kommunikasjonskode under tilpasningen. Dette sikrer at TV-streamer 2 ikke vil påvirke høreapparater båret av andre.

Kraftig elektronisk utstyr, store elektroniske installasjoner og metallgjenstander kan gi en betydelig reduksjon i rekkevidden.

Bruk kun originale ReSound tilbehør.

Ikke foreta endringer eller modifikasjoner på TV-streamer 2.

Åpning av TV-streamer 2 kan skade den. Hvis det skulle oppstå problemer som ikke kan løses ved hjelp av tipsene i feilsøkingdelen, ber vi deg om å kontakte audiografen din.

TV-streamer 2 kan kun repareres av et autorisert servicesenter.

Ikke bruk TV-streamer 2 i områder hvor overføring av radiofrekvenser er forbudt, f.eks. i fly.

TV-streamer 2 må bare kobles til enheter den uttrykkelig er beregnet for.

Tekniske spesifikasjoner

Rekkevidde:	Opptil 7 meter
Strømforsyning:	Ekstern stikkontakt
Trådløs:	2,4 GHz
Driftstemperatur:	0 til 55 ° C
Lagringstemperatur:	-20 til 60 ° C

Temperaturtest, transport og oppbevaringsinformasjon

Dette produktet har gjennomgått ulike tester og temperatur- og fuktighetssykluser mellom -25 °C og +70 °C i henhold til interne standarder og bransjestandarder.

Garanti

TV-streamer 2 dekkes av en begrenset garanti utstedt av produsenten for en periode på 12 måneder fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Vær oppmerksom på at utvidede garantier kan gjelde i ditt land. Vennligst kontakt din lokale audiograf for mer informasjon.

Hva dekkes av denne garantien?

Alle elektriske komponenter som på grunn av dårlig utført arbeid,

feilproduksjon, eller designfeil ikke fungerer normalt under garantitiden, vil bli byttet eller reparert uten kostnad for deler og arbeid ved retur til utsalgstedet.

Hvis det er fastslått at en reparasjon ikke er gjennomførbar, kan hele produktet bli erstattet med en tilsvarende enhet etter gjensidig avtale mellom audiograf og kunden.

Hva dekkes ikke av denne garantien?

Problemer som oppstår ved uriktig håndtering eller ettersyn, overdreven bruk, ulykker, reparasjoner utført av en uautorisert part, eksponering for etsende midler eller skader som skyldes fremmedlegemer i enheten er IKKE dekket av den begrensede garantien, og kan gjøre den ugyldig. Denne garantien påvirker ikke eventuelle lovfestede rettigheter du måtte ha i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning som regulerer salg av forbrukerprodukter. Audiografen din kan ha utstedt en garanti som går utover den tidsbestemte garantien. Ta kontakt med audiografen for ytterligere informasjon.

Serienummer: _____

Kjøpsdato: _____

FEILSØKING

SYMPTOM	ÅRSAK	MULIG LØSNING
<i>Streamingknappen på fjernkontrollen har ingen effekt i det hele tatt</i>	TV-streamer 2 og høreapparatene er ikke paret Fjernkontrollen og høreapparatene er ikke innenfor trådløs rekkevidde	Utfør pareprosessen. Kontroller at fjernkontrollen og høreapparatet er innenfor rekkevidde, og aktiver streaming igjen.
<i>Trykkknappen på høreapparatet er trykket ned i mer enn 3 sekunder, men ingenting hender</i>	TV-streamer 2 og høreapparatene er ikke paret Streameraktivering er deaktivert på høreapparatet.	Utfør pareprosessen. Kontakt din audiograf for å vite hvordan ditt apparat aktiverer streaming.
<i>Pareknappen på TV-streamer 2 er trykket ned, men ingen paremelodi spilles i høreapparatet</i>	TV-streamer 2 og høreapparatene er ikke innenfor trådløs rekkevidde TV-streamer 2 og høreapparatet har ikke vært i paremodus samtidig	Sørg for at TV-streamer 2 og høreapparatet er innenfor rekkevidde, og gjenta pareprosessen. Gjenta pareprosessen og pass på at innen 20 sekunder etter at pareknappen trykkes på TV-streamer 2.

SYMPTOM	ÅRSAK	MULIG LØSNING
<i>Streamingknappen på fjernkontrollen er trykket ned, men intet lydsignal finnes ved søk (indikert av X-ikonet på displayet)</i>	TV-streamer 2 og høreapparatene er ikke innenfor trådløs rekkevidde	Sørg for at TV-streamer 2 og høreapparatet er innenfor rekkevidde, og aktiver streaming igjen.
	TV-streamer 2 ikke er koblet riktig til TV-en, dekodeer eller lydboks.	Koble kabelen mellom TV-streamer 2 og TV-en riktig og aktiver streaming igjen.
	TV-streamer 2 er slått av, eller lyden fra TV-utgangen er dempet (MUTE).	Slå på TV-streamer 2 eller opphev dempingen på TV-en og aktiver streaming igjen.
<i>Ingen lyd i høreapparatet, men er i streamingmodus</i>	TV-streamer 2 og høreapparatene er ikke innenfor trådløs rekkevidde	Sørg for at TV-streamer 2 og høreapparatene er innenfor rekkevidde, og gjenta pareprosessen.
	TV-en kan være slått av eller lyden fra TV-en dempet	Slå på strømmen eller opphev demping på TV-en.
<i>Lyden fra TV-streamer 2 er forvrengt</i>	Lydnivået fra TV-en er for høyt	Juster volumet ved bruk av volumknappene på TV-streamer 2 inntil lyden ikke lenger er forvrengt.

SYMPTOM	ÅRSAK	MULIG LØSNING
<i>Volumnivået fra TV-streamer 2 er svært lavt</i>	Lydnivået fra TV-en er for lavt	Juster volumet ved bruk av "+" og "-" på TV-streamer 2 inntil lyden er passe høy.
<i>Lyden fra TV-streamer 2 er forvrengt eller faller ut av og til</i>	TV-streamer 2 og høreapparatene er ved yttergrensene for trådløs rekkevidde	Flytt deg litt nærmere TV-streamer 2.
	TV-streamer 2 og høreapparatene er ikke innenfor tilstrekkelig synslinje	Påse at TV-streamer 2 er plassert på et egnet sted, og at du er innenfor normal rekkevidde uten betydelige hindringer som blokkerer streamingen.
<i>Lyden fra TV-streamer 2 ikke er synkroniser med TV-bildet</i>	TV-en klarer ikke å synkronisere lyden fra de valgte lydutgangene og bildet	Prøv, hvis mulig å bruke en annen lydutgang fra TV-en. Alternativt kan du følge instruksjonene i delen "Justerbar forsinkelse-modus" i denne bruksanvisningen. Kontakt TV-forhandleren hvis dette ikke hjelper. Streamingen av lyd fra TV-streamer 2 er nesten uten forsinkelse, og bidrar ikke i seg selv til feil med leppesynkroniseringen.

SYMPTOM	ÅRSAK	MULIG LØSNING
<i>Lyden fra TV-streamer 2 er ikke synkronisert med lyden fra TV-høytalerne</i>	TV-en klarer ikke å synkronisere lyden fra de valgte lydutgangene med lyden fra høytalerne på TV-en	<p>Prøv, hvis mulig å bruke en annen lydutgang fra TV-en. Alternativt kan du følge instruksjonene i delen "Justerbar forsinkelse-modus" i denne bruksanvisningen. Kontakt TV-forhandleren hvis dette ikke hjelper.</p> <p>Streamingen av lyd fra TV-streamer 2 er nesten uten forsinkelse, og bidrar ikke i seg selv til oppfattet ekko.</p>
<i>Lyden fra høreapparatene er enten for lav eller for høy</i>	Lydinningsnivået er ikke egnet for lytting	<p>Juster volumet ved bruk av "+" og "-" på TV-streamer 2 inntil lyden er passe høy.</p> <p>Alternativ kan du bruke "+" og "-" på fjernkontrollen (tilbehør) for å justere volumet.</p>
<i>Et høreapparat faller utilsiktet ut av et streamingprogram</i>	<p>TV-streamer 2 og høreapparatene har vært utenfor trådløs rekkevidde i mer enn 5 minutter</p> <p>Batteriet i høreapparatet er så tomt at det ikke lenger støtter streaming</p>	<p>Sørg for at TV-streamer 2 og høreapparatet er innenfor rekkevidde, og aktiver streaming igjen.</p> <p>Bytt ut batteriet i høreapparatet med et nytt.</p>

Vær oppmerksom på informasjon som er merket med advarselsymbol.



ADVARSEL indikerer en situasjon som kan føre til alvorlig personskade.

FORSIKTIG indikerer en situasjon som kan føre til mindre og moderate personskader.



Råd og tips om hvordan du kan håndtere ditt ReSound tilbehør bedre.



Utstyret inneholder RF-sender.

Nominell RF utgangseffekt sendt er 16,3 dBm.



Produktet er en type B anvendt del.



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.



Spør din lokale audiograf om avhending av ReSound tilbehør

© 2018 GN Hearing A/S. Med enerett. ReSound er et varemerke som tilhører GN Hearing A/S. Dolby og dobbelt D-symbolet er varemerker tilhørende Dolby Laboratories.

Produsent i henhold til EUs direktiv om medisinsk utstyr 93/42/EØF:

Internasjonalt

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark
Tlf.: +45 4575 1111
resound.com

Norge

GN Hearing Norway AS
Postboks 132 Sentrum
NO-0102 Oslo
Tlf.: +47 22 47 75 30
post@gnresound.no
resound.com

CVR no. 55082715

400248008NO-20.03-Rev.C



Eventuelle spørsmål vedrørende EUs direktiv for medisinsk utstyr 93/42/EØF eller EUs radioutstyrsdirektiv 2014/53/EU, skal rettes til GN Hearing A/S.

