



TV-Streamer+

Bruksanvisning

Innholdsfortegnelse

Introduksjon	3
Symboler	5
Slik gjør du deg kjent med enheten	6
Slik installerer du enheten	9
Bruk av enheten for første gang	11
Slik aktiverer du strømming	16
Daglig bruk	17
Generelle advarsler og forholdsregler	20
Vedlikehold	23
Tekniske spesifikasjoner	25
Juridisk informasjon	27
Kunngjøring	29
Anerkjennelser	31

Introduksjon

Les dette heftet nøye før du bruker enheten. Spør audiografen din hvis du har spørsmål.

Tiltenkt hensikt

TV-Streamer+ er ment å være en trådløs tilkobling til et fjernsyn eller annen lydenhet for våre trådløse høreapparater.

GN Hearing A/S TV-Streamer+ kan også brukes sammen med godkjente partnerprodukter fra Cochlear Ltd eller Cochlear Bone Anchored Solutions AB.

Godkjent partnerprodukt refererer til spesifikke produkter utgitt og markedsført av Cochlear Ltd eller Cochlear Bone Anchored Solutions AB-partnere.

Eventuell kompatibilitet med godkjente partnerprodukter er og er underlagt partnerens eget ansvar.

Målgruppe

TV-Streamer+ er beregnet for bruk av lekpersoner.

Behandlingsindikasjoner

Tilbehøret har ingen terapeutiske indikasjoner i seg selv.

Kontraindikasjoner

Ingen kjente kontraindikasjoner.

Symboler

Symbolene nedenfor brukes i denne bruksanvisningen, på enheten eller på emballasjen.



FORSIKTIG: Indikerer en situasjon som kan føre til mindre og moderate personskader.



ADVARSEL: Indikerer en situasjon som kan føre til alvorlig personskade.



Produksjonsdato.



Juridisk produsent.



Samsvarmerke for EU.



Følg bruksanvisningen. (Logo i blått)



REF Katalognummer.



Unik enhetsidentifikator.



Enheten er underlagt US-sertifisering.



Serienummer.



Samsvarmerke for Japan.



Samsvarmerke for Australia og New Zealand.



Samsvarmerke for Malaysia.



Samsvarmerke for Taiwan.



Anatel-sertifiseringsmerke



Samsvarmerke for Korea.



Utstyret inneholder en RF-sender.




CMIIT ID: XXXxyzzz




Følg lokale forskrifter ved kassering av elektronisk utstyr.

Slik gjør du deg kjent med enheten


Utpakker — boksens innhold

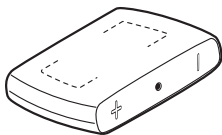


TV-Streamer+

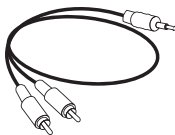


Analog lydkabel

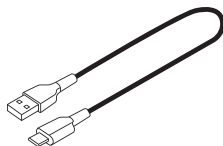

USB-A til USB-C-kabel

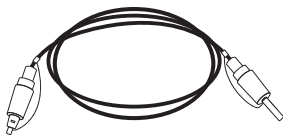

Digital (optisk) lydkabel (fjern kabeldekslene før bruk)

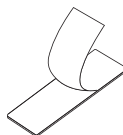


Krok- og løkke-tape

Beskrivelse


Enheten gir strømmet lyd fra din TV, HiFi-stereo, PC eller lignende enhet direkte til høreapparatene dine.

Avhengig av TV-en, HiFi-stereoanlegget, datamaskinen eller annet lydoppsett, for installasjon av TV-Streamer+ se – "Slik installerer du enheten". Tilkoblingsguiden viser deg hvordan du setter opp de fysiske tilkoblingene.

Hovedfunksjoner

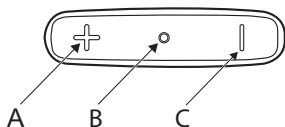

- A. Volumøkning
- B. Strømindikator
- C. Volumreduksjon

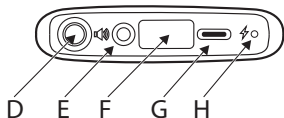

- D. Sammenkoblings-/forsinkelsesmodusknapp
- E. Lydinngang: analog eller digital (optisk)
- F. Serienummer
- G. Strømtilkobling: USB-C
- H. LED-indikator: strøm

LED-informasjon

Grønne LED-lysmønstre for streaming og sammenkobling.

LED-mønstre	Prosess	Beskrivelse
	Streaming	Konstant PÅ
	Stand-by	Konstant AV
	Paringsmodus	Blinking
	Vellykket sammenkobling	Konstant PÅ i 3 sekunder
	Fastvareoppdatering	Rask blinking
	Justerbar forsinkelsesmodus	Lang blinking
	Programvareproblem (omstart/tilbakestilling nødvendig)	3 gjentatte blink av medium lengde
	Fastvareoppdatering fullført	Konstant PÅ i 3 sekunder


Slik installerer du enheten

Koble enheten til en strømkilde

Enheden kan få strøm direkte fra TV-ens USB-A-kontakt via den medfølgende USB-A til USB-C-kabelen. USB-A-pluggen kan alternativt settes inn i en hvilken som helst passende strømkilde.

USB-C-kontakten settes inn i enheten.

LED-lyset på baksiden av enheten vil vise hvitt for å indikere aktivering etter at strømkabelen er satt inn i en strømkilde.

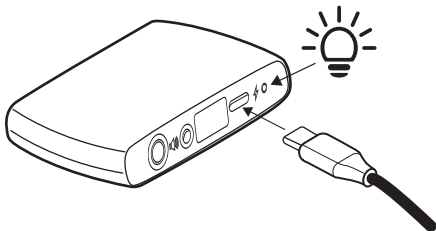


Kabeltilkoblingsmuligheter

Du kan bruke enten den analoge lydkabelen eller den digitale (optiske) lydkabelen for å levere et lydsignal til TV-Streamer+.

Analog kabeltilkobling


For TV med analog lyd: Sett 2-i-1 lydpluggene inn i L- og R-AUDIO-kontaktene på TV-en og den andre enden i TV-Streamer+.

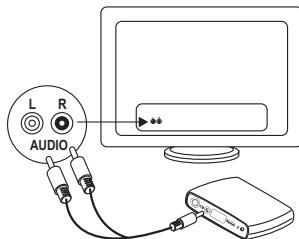

Digital kabeltilkobling

Den digitale (optiske) kabelen har et deksel i hver ende av kabelen som må fjernes før bruk.

Sett den firkantede pluggen inn i TV DIGITAL AUDIO OUT-kontakten og den runde pluggen inn i TV-Streamer+.

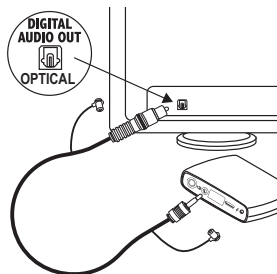

Bruk av enheten for første gang

Før du kan begynne å bruke din enhet til å strøomme lyd til høreapparatene dine, må enheten være koblet til et strømuttak, koblet til TV-en og paret med høreapparatene dine.

Koble kun enheten til tilkoblinger den er beregnet for.


MERK: Det anbefales å feste enheten på bakpanelet på TV-en etter at du har koblet til alle kabler og etter at du har paret enheten med høreapparatene dine

Pare enheten med høreapparatene

For å overføre lyd fra enheten til høreapparatet må du pare/sammenkoble enhetene.

MERK: For å unngå tilfeldig sammenkobling, slå av alle andre høreapparater i nærheten. Hvis det ikke er mulig å slå av høreapparatene som ikke skal pares, plasser dem minst 1 meter (3 fot) fra enheten.

1. Apparatet og høreapparatene må være slått PÅ og være innenfor 5 cm (2 tommer) fra hverandre.
2. Sammenkoblingsmodus aktiveres ved et raskt trykk på sammenkoblingsknappen på baksiden av enheten. Trykk på knappen til LED-lyset begynner å blinke grønt i korte intervaller.
3. Høreapparatene vil bli pare/sammenkoblet ett om gangen.
4. LED-en vil slutte å blinke i 3 sekunder etter at det første høreapparatet er pare/sammenkoblet, og fortsetter deretter automatisk å pare/sammenkoble det andre høreapparatet.
5. Når at enheten er pare/sammenkoblet med høreapparatene, og enheten slås PÅ, vil enheten begynne å strømmen lyd til høreapparatene.

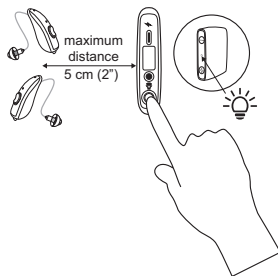

LED-sekvensen for sammenkobling

TV-Streamer+ paringsalternativet er åpent i 3 minutter, men streaming kan starte før paringssøket er fullført.

- Blinkende LED = første sammenkobling (ca. 12 sekunder)
- LED konstant PÅ
- Blinkende LED = andre sammenkobling (ca. 12 sekunder)

12 Bruk av enheten for første gang


- LED konstant PÅ
- Blinkende LED = søker etter flere høreapparater (ca. 15 sekunder)
- LED konstant PÅ = streaming.

Justering av volum

Lydnivået er satt til å gi et behagelig lyttenivå fra det øyeblikket enheten aktiveres. Men for enkelhets skyld kan du justere lydnivået når som helst.

For å endre volumet: trykk på '+'-knappen for å heve volumet eller '-'-knappen for å senke volumet.

Det anbefales å stille inn volumet før du fester enheten til TV-en.

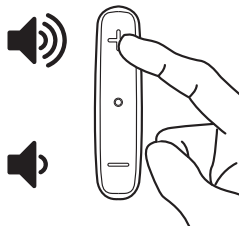


Justerbar forsinkelsesmodus


Noen lydsystemer skaper en forsinkelse i lydproduksjonen. Denne forsinkelsen kan føre til at bildet fra TV-en ikke stemmer overens med lyden.

Forsinkelsesmodus lar deg matche TV-bildet med lyden ved å øke eller redusere tiden mellom strømmingen av lyd til høreapparatene dine.

1. Forsinkelsesmodus aktiveres etter å ha trykket på sammenkoblings-/forsinkelsesknappen i 10 sekunder. LED-en vil blinke grønt i lange intervaller for å bekrefte at du er i forsinkelsesmodus.

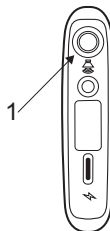

2. Trykk på + eller - for å øke eller redusere lydforsinkelsen fra TV-en.

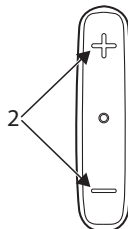


3. For å gå ut av forsinkelsesmodus, trykk og hold nede sammenkoblings-/forsinkelsesknappen i 3 sekunder eller start TV-Streamer+ på nytt ved å ta ut og sette inn strømkabelen igjen.

Plasseringen av enheten

Selv om du kan plassere TV-Streamer+ nesten hvor som helst innenfor begrensningene for kabellengden, anbefales det å feste TV-Streamer+ på

bakpanelet til TV-en. Fjern et av plastdekslene fra de klebrige putene og plasser den klebrige puten på TV-Streamer+. Fjern det gjenværende plastdekselet fra puten og bruk den klebrige puten til å plassere enheten nær kanten eller toppen av TV-en på bakpanelet.

- A. Krok- og løkke-tape
- B. Anbefalte plasseringsalternativer for å feste TV-Streamer+
- C. Ikke fest TV-Streamer+ i midten av TV-en

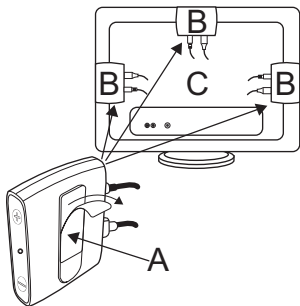

Slik aktiverer du strømming

MERK: Sørg for at din TV-Streamer+ er slått PÅ.

Det er tre måter å streame på.

- Trykk på den konfigurerte trykknappen på høreapparatet
- Autostreaming
- Start i appen.

Din audiograf kan konfigurere hvordan du aktiverer en stream med høreapparatets trykknapp.

Hva er AutoStreaming?

Når AutoStreaming er aktivert, vil din TV-Streamer+ automatisk begynne å strøomme til de sammenkoblede høreapparatene når enten TV-Streamer+ eller høreapparatene er slått PÅ.

AutoStreaming kan aktiveres/deaktiveres i høreapparatappen din eller av audiografen din.

Standardinnstillingen er AV for TV-Streamer+.

Daglig bruk

PÅ / AV

Slå PÅ TV-en. For å godta TV-lyden i høreapparaterne dine, trykk på den konfigurerte trykknappen. Hvis ingen lyd streames, se forrige avsnitt 'Hvordan aktivere streaming'.

Lyden fra TV-en vil da blande seg med de andre lydene som fanges opp av høreapparaterne dine.

For å slå AV TV-lyden, trykk på den høreapparatkonfigurerte trykknappen eller slå AV TV-en.

Når TV-Streamer+ ikke blir brukt i lengre perioder, koble strømforsyningen fra veggkontakten



ADVARSEL:Når du kobler fra en ledning, må du trekke i støpslet og ikke trekke i ledningen.

Andre lydkilder

Du kan bruke TV-Streamer+ med andre enheter som har compatible utganger, for eksempel en personlig datamaskin eller andre lydsystemer.

Justering av volumet

TV-lyden kan justeres opp/ned på høreapparaterne dine, høreapparatets fjernkontroll (tilleggsutstyr) eller høreapparat-appen (tilleggsutstyr).

Spør audiografen om mer informasjon om disse alternativene for betjening av TV-Streamer+.

Koble enheten og høreapparat-appen

Enheden kan styres via samme app som støtter høreapparatene dine.

Dette lar deg starte og avslutte streamingen og justere volumet fra appen.

Appen gir tilgang til en rekke innstillingsalternativer som Auracast™ kringkastingslyd og lydforsinkelse.

Om nødvendig vil appen gi varsler om fastvareoppdateringer og produktforbedringer.

Last ned appen eller spør audiografen din for mer informasjon.

MERK: Enheter levert av partnere har kanskje ikke samme app-funksjonalitet.

Telefonsamtaler

Når du bruker enheten kan du fortsatt motta telefonsamtaler hvis høreapparatet er koblet til mobilenheten.

Du vil høre et varsel i høreapparatene dine for å signalisere et innkommende anrop, og høreapparatene dine vil automatisk stoppe lydsignalet fra enheten hvis du velger å svare på det innkommende anropet – se bruksanvisningen for høreapparatet eller partnerenheten for mer informasjon om hvordan ta imot telefonsamtaler.

Høreapparatene skifter automatisk tilbake til enhetslydsignalet etter at telefonsamtalen avsluttes.

Område

Strømmeområdet fra enheten til høreapparatet er opptil 7 meter (23 fot) , avhengig av høreapparatet. Du trenger ikke å ha TV-en innen synsvidde, du kan være i et annet rom. Imidlertid kan miljøpåvirkning som vegger eller møbler redusere rekkevidden.

Hvis høreapparatene er utenfor rekkevidden til enheten, vil lydoverføringen stoppe. Når høreapparatene er tilbake i enhetens rekkevidde vil lydsignalet automatisk gjenoppta strømmingen.

Det er en tidsbegrensning på 5 minutter for automatisk gjenoppkobling. Hvis du er utenfor rekkevidde i mer enn 5 minutter må du starte strømmingen på nytt manuelt.

Denne enheten inneholder en RF-sender som virker i frekvensområdet 2,4 GHz – 2,48 GHz.

Tilbakestiller enheten

Hvis LED-lampen blinker 3 middels gjentatte blink, kan dette være et programvareproblem som krever omstart av enheten. Dette problemet kan løses ved å starte systemet på nytt.

For å starte enheten på nytt: koble fra og koble til strømforsyningen. Hvis feilen av en eller annen grunn vedvarer i flere forsøk med omstart, må enheten sendes til service.

For å tilbakestille til fabrikkinnstillingene: trykk og hold inne volumknappen +-knappen i 10 sekunder mens du samtidig slår enheten på.

Generelle advarsler og forholdsregler



ADVARSEL:

- TV-Streamer+ kan bli forstyrret av annet utstyr.
Når du bruker TV-Streamer+ og enheten påvirkes av elektromagnetiske forstyrrelser, må du bevege deg bort fra kilden.
- Når du bruker trådløse funksjoner benytter TV-Streamer+ lav-energi digitalt kodende overføringer for å kommunisere med andre trådløse enheter. Det er mulig, men ikke sannsynlig, at andre elektroniske enheter kan bli påvirket. Hvis dette skjer, må du flytte TV-Streamer+ bort fra den berørte enheten.
- Eksterne enheter koblet til den elektriske inngangen må være trygge i henhold til kravene i IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020, IEC 60065, or IEC 60950-1, IEC 62368-1, etter hva som er hensiktsmessig.
- Det er ikke tillatt å foreta endringer på denne enheten.
- Hold produktet med eventuelle ledninger og kabler borte fra maskiner i drift.
- Hvis enheten blir overopphetet, faller til bakken, skades eller senkes ned i væske, eller hvis strømadapteret, kabelen eller støpselet er skadet, må du slutte å bruke den og kontakte audiografen din.
- Må ikke brukes i områder hvor det er eksplosjonsfare eller fare for antennelse av brannfarlige gasser.

- Unngå å utsette produktet for regn, fuktighet eller andre væsker for å beskytte mot skader på produktet eller deg selv.
- Hold høreapparatene og enhetene dine, sammen med eventuelle deler, batterier og magneter, borte fra kjæledyr, barn og personer med kognitive, intellektuelle eller psykiske problemer.
- Bruk alltid den nyeste tilgjengelige programvareoppdateringen for enheten din.



FORSIKTIG:

- Kraftig elektronisk utstyr, store elektroniske installasjoner og metallgjenstander kan gi en betydelig reduksjon i rekkevidden.
- Hvis høreapparatene ikke responderer på enheten på grunn av forstyrrelser, beveger du deg bort fra området med forstyrrelser.
- Bruk kun GN Hearing A/S originaltilbehør.
- Ikke bruk dette utstyret på steder hvor det er forbudt å bruke elektronisk utstyr.
- Høreapparatene og denne enheten fikk tildelt en unik kommunikasjonskode under tilpasningen. Dette sikrer at enheten ikke påvirker høreapparater brukt av andre.
- TV-Streamer+ må kun repareres av et autorisert servicesenter.
- Åpning eller endring av TV-Streamer+ kan skade den. Hvis det skulle oppstå problemer som ikke kan løses ved å følge retningslinjene i feilsøkingsdelen i denne bruksanvisningen, må du kontakte audiografen din.

Vedlikehold

Rengjøring

Rengjør enheten med en fuktig klut. Bruk aldri husholdningsrengjøringsprodukter (vaskepulver, såpe osv.) eller alkohol for å rengjøre enheten.

Vedlikehold

Denne enheten kan ikke betjenes eller repareres i hjemmet. Ta kontakt med din lokale audiograf for å få hjelp hvis enheten ikke fungerer som forventet.

Sjekkliste for tilkoblinger

Hvis du ikke kan høre lyden fra TV-en eller lydkilden, kontroller følgende:

- Test tilkoblingen av TV-Streamer+ til høreapparatene – Se «Pare enheten din».
- Test tilkoblingen av TV-Streamer+ til TV-en eller lydenheten – Se «Slik installerer du enheten».
- Sørg for at alle kabler er riktig satt inn i TV-Streamer+ og TV-en eller lydenheten
- Bekreft at TV-Streamer+ har strøm – se etter indikatorlampen på TV-Streamer+ – Se «Slik installerer du enheten».

MERK: Hvis du hører summing i høreapparatene dine etter at du har koblet til TV-Streamer+ via lydkabelen, gjør du følgende for å løse problemet:

- koble TV-Streamer+ til TV-en via den digitale (optiske) kabelen
- bruk en ekstern strømkilde
- skru opp lyden på TV-en og ned i høreapparatene.

Tekniske spesifikasjoner

Mål	
Lengde x vidde x høyde	70,6 x 15,7 x 49,5 mm (2,7 x 0,6 x 1,9")

Driftsforhold	
Driftsområde	Opptil 7 meter (23 fot)
Strømforsyning	USB-kompatibel forsyning 5V DC
Trådløst	2,4 GHz
Nominell overført RF utgangseffekt:	maksimalt 12.0 dBm
Driftstemperaturområde	5 °C til 40 °C (41 °F til 104 °F)

Temperaturforhold	
Lagringstemperaturområde	-25 °C til 70 °C (-13 °F to 158 °F)
Testing av temperatur	Enheten er gjenstand for ulike tester i temperatur- og fuktig oppvarmingssyklus mellom -25 °C og 70 °C i henhold til interne og industristandarder.

Juridisk informasjon

Garanti og reparasjoner

TV-Streamer+ dekkes av en begrenset garanti utstedt av produsenten for en periode på en periode på 12 måneder fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Vær oppmerksom på at utvidede garantier kan gjelde i ditt land. Ta kontakt med din lokale audiograf for mer informasjon.

Hva dekkes av denne garantien

Enhver elektrisk komponent som på grunn av utførelses-, produksjons- eller designfeil ikke fungerer som den skal under normal bruk i løpet av denne garantiens levetid, vil bli erstattet eller reparert uten kostnad for deler eller arbeid når de returneres til kjøpsstedet.

Hvis det fastslås at reparasjon ikke er mulig, kan hele enheten erstattes med en tilsvarende enhet etter gjensidig avtale mellom audiografen og kunden.

Hva dekkes ikke av denne garantien

Problemer som oppstår fra feil håndtering eller stell, overdreven bruk, ulykker, reparasjoner utført av en uautorisert part, eksponering for korrosive forhold eller skade på grunn av fremmedlegemer som kommer inn i enheten, dekkes IKKE av den begrensede garantien og kan gjøre den ugyldig. Garantien ovenfor påvirker ikke eventuelle juridiske rettigheter du måtte ha under gjeldende nasjonal lovgivning som regulerer salg av forbrukerprodukter. Din audiograf kan ha utstedt en garanti som går utover klausulene i denne begrensede garantien. Ta kontakt med din audiograf for mer informasjon.

Forventet levetid

Forventet levetid for enheten er minimum 5 år.

Kunngjøring

Dette produktet samsvarer med del 15 av FCC-reglene.

Bruken forutsetter følgende to betingelser: (1) denne enheten forårsaker ikke skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere enhver interferens mottatt, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Denne digitale enheten i Klasse B er i samsvar med den kanadiske ICES-003.

Merk. Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en Klasse B digital enhet ifølge del 15 av FCC-reglene. Disse grenseverdiene er fastsatt for å gi en rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det føre til skadelige forstyrrelser i radiokommunikasjon. Det gis ikke noen garanti for at interferens ikke vil oppstå i et bestemt oppsett. Dersom dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Stille inn på nytt eller flytte receiverantennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og receiveren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som receiveren er koblet til.
- Kontakte forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Denne enheten er i samsvar med følgende forskriftskrav

- I EU: Enheten er i samsvar med de generelle sikkerhets- og ytelseskravene i henhold til vedlegg I til EUs forordning for medisinsk utstyr 2017/745 (MDR).
- Herved erklærer GN Hearing A/S at radioutstyret type SAS-4 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten i EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende nettadresse:
www.declarations.resound.com/en
- I USA: FCC CFR 47 del 15, underdel C.

Modell: SAS-4; FCC ID: X26SAS-4; IC: 6941C-SAS-4.

For andre identifiserte internasjonale regulatoriske krav i land utenfor EU og USA, henviser vi til lokale forskrifter for disse områdene.

Samsvar med den japanske radioloven og den japanske forretningstelekommunikasjonsloven: Denne enheten er sertifisert til å være i samsvar med den japanske radioloven (電波法) og den japanske forretningstelekommunikasjonsloven (電気通信事業法).

Anerkjennelser

Deler av denne programvaren er skrevet av Kenneth MacKay (micro-ecc) og lisensiert under de følgende vilkårene:

Copyright © 2014, Kenneth MacKay. Med enerett.

Redistribusjon og bruk i kildeform og binær form, med eller uten endringer, er tillatt forutsatt at følgende vilkår blir overholdt:

- Redistribusjon av kildekode må inneholde opphavsrettsmerknaden ovenfor, denne listen over vilkår og den følgende ansvarsfraskrivelsen.
- Redistribusjon i binær form må inkludere den viste opphavsrettsmerknaden, denne listen over vilkår og den følgende ansvarsfraskrivelsen i dokumentasjonen og/eller annet materiale levert med distribusjonen.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV RETTIGHETSHAVERNE OG BIDRAGSYTERE "SOM DEN ER" OG ALLE DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET OG FOR ET SPESIELT FORMÅL AVVISES. COPYRIGHTHOLDEREN ELLER BIDRAGSYTERE SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER BLI HOLDT ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL KJØP AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER OMSETNING, ELLER FORRETNINGSAVBRUDD) UANSETT GRUNN OG ANSVARSTEORI, ENTEN I KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER TORT (INKLUDERT FORSØMMELSE ELLER ANNET) SOM MÅTTE OPPSTÅ PÅ ENHVER MÅTE SOM FØLGE AV BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM BRUKEREN ER BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

© 2025 GN Hearing A/S. Med enerett.

Produsent i henhold til EUs
forordning for medisinsk utstyr
2017/745:



GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark



Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med enheten skal rapporteres til den juridiske produsenten GN Hearing A/S og kompetent myndighet i EU-medlemslandet der brukeren og/eller pasienten er bosatt.